




UTILISATION DU MASQUE VISIÈRE BIC

6 Le support de visière est réutilisable.

Si la visière est sale, endommagée ou rayée elle peut être enlevée et remplacée par une visière neuve.


Dans ce cas, déclipser la visière et reclipser la visière neuve de la même manière.

L'élastique peut également être remplacé.

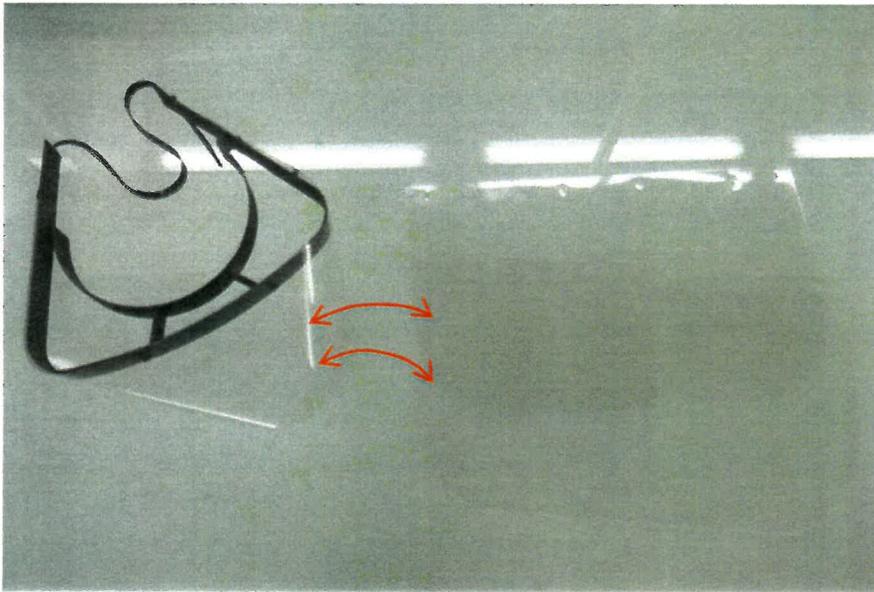


UTILISATION DU MASQUE VISIÈRE BIC

1 Le masque visière BIC est composé de 3 éléments : le support de visière, la visière et l'élastique.

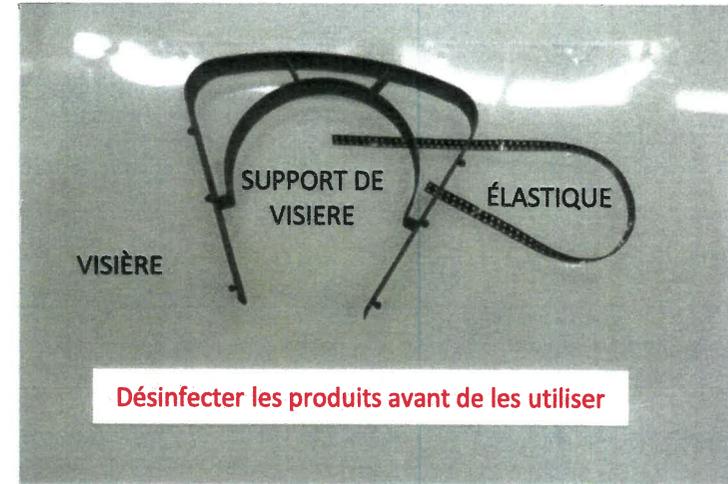


2 Mettre l'élastique sur les clips à l'arrière du support de visière. Régler la taille en fonction du tour de tête.

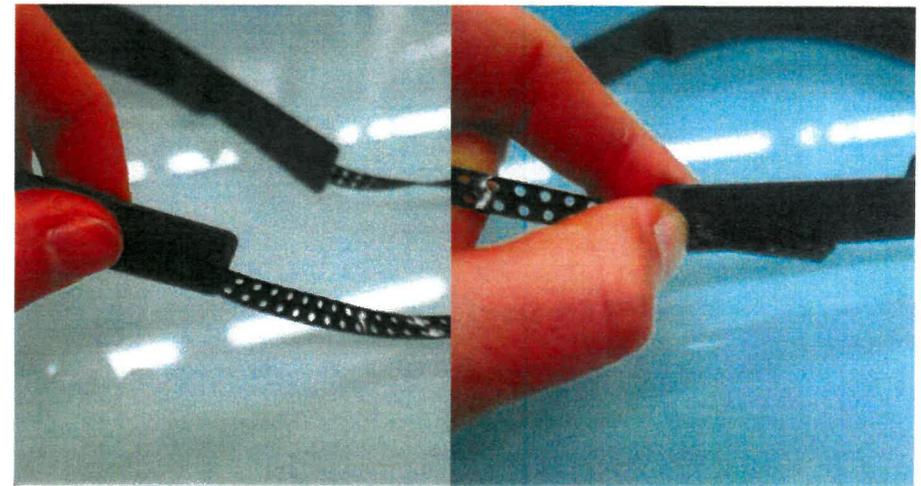



UTILISATION DU MASQUE VISIÈRE BIC

- 3 Clipser la visière en partant de l'avant-dernier clip.

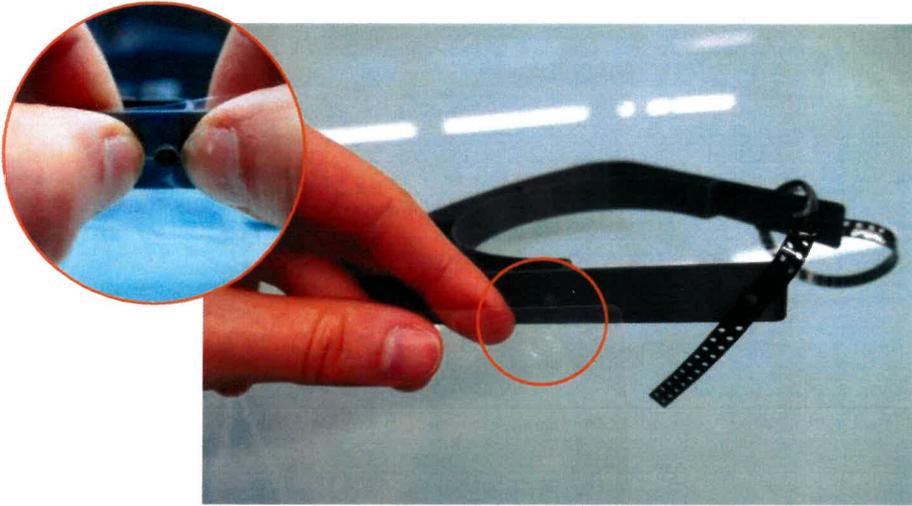

- 4 Le masque visière BIC est assemblé.



- 5 Le masque visière BIC permet de ne pas déformer le champ de vision au niveau des yeux du fait de la forme plate du support.

